



Installation de la ceinture lombaire

Guide d'utilisation — Étape par étape

neurodisk.ca

La ceinture lombaire est un dispositif de soutien conçu pour stabiliser la région lombaire (bas du dos), réduire la douleur et limiter les mouvements nocifs durant la guérison ou l'effort physique. Pour être efficace, elle doit être portée correctement et ajustée à votre morphologie.

Vue frontale — Port de la ceinture lombaire

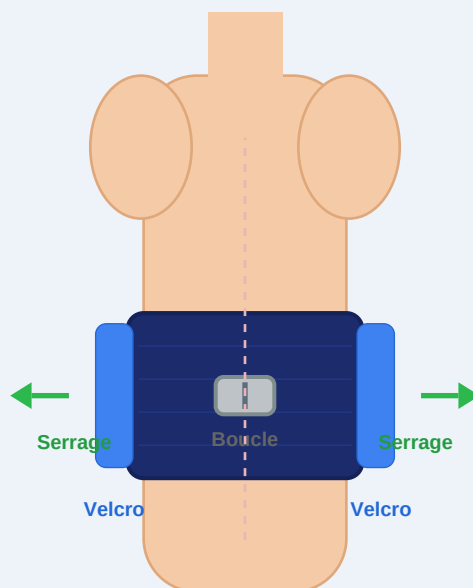


Illustration : anatomie de la ceinture et zones de contact

Marche à suivre

1

Préparer la ceinture

Déroulez complètement la ceinture et ouvrez toutes les attaches velcro. Identifiez l'endroit (zone rigide ou renforcée) — il doit se positionner dans le bas du dos.

2**Se positionner debout ou assis droit**

Tenez-vous droit, les pieds écartés à largeur d'épaules. Cette posture neutre facilite un placement optimal de la ceinture sur la région lombaire (L1-L5).

3**Positionner la ceinture**

Passez la ceinture autour de votre taille, la partie rigide dans le creux du dos. Le bord inférieur doit suivre la ligne du bassin; le bord supérieur ne doit pas dépasser les côtes.

4**Premier serrage (modéré)**

Fermez les attaches principales en commençant par le centre. Le serrage doit être ferme mais confortable — vous devez pouvoir respirer profondément sans restriction.

5**Ajuster les sangles secondaires**

Serrez les bandes d'ajustement latérales de façon symétrique, en tirant vers l'avant. Vérifiez que la ceinture ne remonte pas et reste parallèle au sol.

6**Vérifier le confort et la mobilité**

Faites quelques mouvements doux (flexion légère, rotation). La ceinture doit soutenir sans couper la circulation ni créer de points de pression douloureux.

Conseils et mises en garde

✓ Bonne pratique

Portez la ceinture directement sur un vêtement léger (t-shirt fin) pour éviter l'irritation cutanée et maintenir une bonne hygiène. Retirez-la la nuit sauf avis contraire de votre professionnel de santé.

i Durée de port recommandée

En général, 4 à 6 heures par jour lors des activités à risque (position debout prolongée, levée de charges). Un usage prolongé sans exercice de renforcement peut affaiblir les muscles du dos.

■ Attention

Si vous ressentez des fourmillements, engourdissements ou une aggravation de la douleur, retirez immédiatement la ceinture et consultez votre professionnel de santé.